



密度・比重計 The DDM2911 Automatic Density Meter





覗き込みは一切不要。

VideoView™で気泡の確認をワンタッチ


ビデオビュー機能は測定セル部を10倍に拡大表示します。測定試料を入れ替える度に必要だった覗き込み確認も、気泡の為に再測定を必要とされる事もすべて解放されます。

10.4インチカラー液晶タッチパネルにより操作性を向上。Windows®ベースのソフトウェアは直感的にユーザーを導いてくれます。また、大容量2GBの内蔵メモリには全ての情報を安全に保存する事が出来ます。

windowsはMicrosoft社の登録商標です。

軽いタッチで、ラクラク操作。

迷いはありません!! 直感的に測定までをナビゲート。

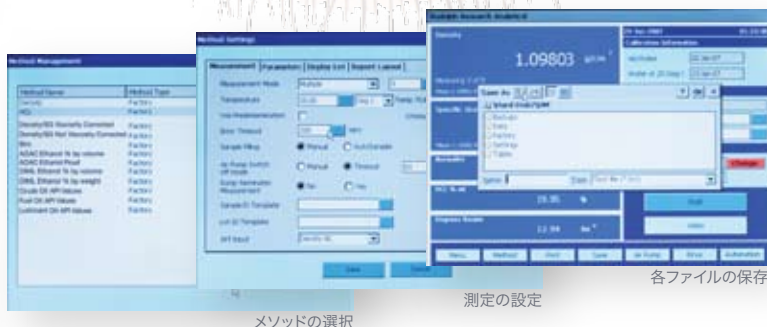

メソッドの選択

測定の設定

各ファイルの保存

充実のインターフェイスはどんな環境でも。

標準装備でネットワークポートx1、USBポートx3、RS232Cx2を装備しています。LIMSへの接続もネットワークサーバーへの出力も対応しています。オプションのキーボード/バーコードリーダーもUSB接続で対応しています。

完璧なサポートは安心へとつながります。

NIST校正標準溶液からバリデーションサポートまで。



仕様詳細

測定範囲	0 - 3 g/cm ³	オプション関係 詳細はお問い合わせください。
測定温度範囲	0 - 90℃	21CFR Part11ソフトウェア
測定精度	0.00005 g/cm ³ 0.03 ℃	屈折計との接続オプション
分解能	0.00001 g/cm ³ 0.01 ℃	オートサンプラーシステム
再現性	0.00001 g/cm ³ 0.01 ℃	各種校正標準溶液
測定方式	振動周期測定方式	
サイズ	45.7cm(L) x 27.9cm(W) x 53.3cm(H) /22kg	
電源	100V AC , 50/60Hz	



**Systems
Engineering**

株式会社 システムズエンジニアリング

本社 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24
パシフィックスクエア千石
TEL (03)3946-4993 FAX (03)3946-4983
西日本営業所 〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町294 Yp-1.
TEL (0748)31-3942 FAX (0748)31-3942
<http://www.systems-eng.co.jp> info@systems-eng.co.jp

本カタログに記載されている外観及び各仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。